

**Rätt** dragriktning  
Riktig trækretning




Tillverkare / Manufacturer  
Anatomic SITT AB  
Box 6137, SE-60006 Norrköping  
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



*Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den Europeiska hjälpmedelsmarknaden.*



**Fel** dragriktning  
Forkert trækretning  
Bækkenet faller bakåt  
Bækkenet falder bagover.

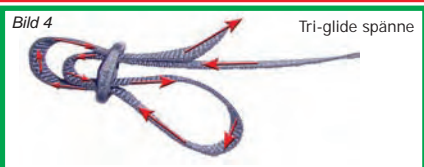

Tri-glide spänne



**Sittbelt**  
Höftbälte med 2 fästpunkter



**Sittbelt**  
Höftbälte med 1 fästpunkt

## SE- SittBelt ska monteras och anpassas av medicinsk/behörig personal.

- 1) SittBelt monteras på rullstolen fästpunkterna. Titta efter ett rör som går under eller vid sidan av sittplattan.
- 2) Trä bandet genom bif. - Tri-glide spänne som bild 4 visar. Om banden är för långa klipp av överflödigt band och bränn änden.
- 3) Justera dragriktningen genom att spänna respektive band, bild 2.
- 4) Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat. Drag åt lagom hårt. Om brukaren känner obehag lossa på trycket.
- 5) Bälteskuddarna sitter är justerbara i sidled. Justera dem för att ge optimal tryckavlastning.

## Efterkontroll (Kontrolleras vid varje ny insittning)

- Dragriktningen enl. bild 2 • Trycket på bandet • Placeringen av bälteskuddarna.

Tvåtråd Support Exklusiv 40°, fintvätt • Support Soft 60°, fintvätt. Ej torktumlare eller torkskåp.

Garanti 1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB.

Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda bältet.

Kontroll av slitage Kontrollera regelbundet banden (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage.

Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. För övriga kombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

## DK - SittBelt skal monteres og tilpasses af medicinsk/oplært personale.

- 1) SittBelt monteres på kørestolen via fire fæstningspunkter. Kig efter et rør som går under eller ved siden af sædepladen. Se billed 1.
- 2) Træk båndene gennem medfølgende Tri-glide-spænde som vist på billed 4. Er båndene for lange klippes det overflødige væk og enderne brændes.
- 3) Justere trækretningen ved at spændesamtlige bånd som vist på billed 2.
- 4) Træk i begge sider af spændet for at få det centreret. Træk så det sidder stramt. Hvis brugeren føler ubehag løsnes båndet lidt.
- 5) Bæltepuderne kan justeres sidevers. Juster dem så de giver optimal trykaflastning

## Kontrol (Kontrollér ved alle monteringer)

- Trækretningen som vist på billed 2 • Trykket på båndet • At der er plads omkring halsen - Placeringen af bæltepuderne.

Vaskeanvisning Support Exklusiv 40° finvask • Support Soft 60° finvask, må ikke tørtumbles eller komme i tørreskab.

Garanti 1 år, anvend kun reservedele fra Anatomic SITT ApS, Danmark


Kontroller jævnlig brugeren for eventuelle alvorlige røde mærker. Ved røde mærker der kan give sår skal De ophøre med brugen.

Kontrol af slitage Kontrollér jævnligt båndene og puderne for slitage.

Produktet passer til siddesystemet Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. For øvrige kombinationer kontakt Anatomic SITT A/S.

Genanvendelse af en brugt del eller produkt der afmonteres og skrottes. Delene skal opdeles efter type af materiale.

Pic 2

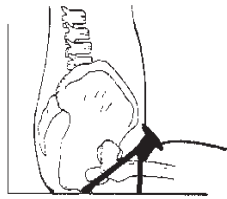

Korrekt draretning  
The right drawing  
direction.




Tillverkare / Manufacturer  
Anatomic SITT AB  
Box 6137, SE-60006 Norrköping  
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00




*The Support Series is developed and CE-marked to fit wheelchairs/seating systems on the European Medical Aids Market.*

Pic 3

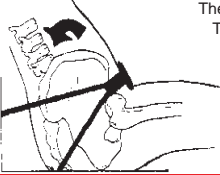

Beltet plassert for høyt, feil draretning.  
The wrong drawing direction.  
The belt is placed too high.  
Bekkenet faller bakover.  
The pelvis is falling  
backwards.

Pic 4

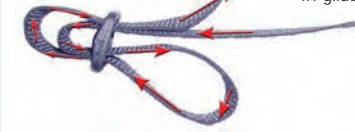

Tri-glide buckle



**Sittbelt**  
Hip belt with 2 fix points



**Sittbelt**  
Hip belt with 1 fix point

## NO – Sittbelt skal monteres og tilpasses av medisinsk/kvalifisert personale.

- 1) Sittbelt monteres på rullestolen via fire festepunkter. Se etter ett rør som går under eller ved siden av setet.
- 2) Tre båndet gjennom vedlagte Tri-glidespenne, bilde 4. Hvis båndene er for lange, klipp av overflødig bånd og brenn endene.
- 3) Juster draretningen ved å spenne de respektive bånd, jmnf. bilde 2.
- 4) Dra til beltet på begge sider av spennen for å sentrere det. Dra til passe hardt. Hvis brukeren føler ubehag må det løsnes på trykket.
- 5) Belteputene er sideveis justerbare. Juster dem for å gi optimal trykkavlastning.

## Etterkontroll (kontroller ved hver ny innsitting)

- Draretning i forhold til bilde 2 • Trykk på båndet • Plassering av belteputene.

**Rengjøring** Support Eksklusiv 40°, fintvätt • Support Soft 60°, fintvätt. Ikke tørketrommel eller tørkeskap.

**Garanti** 1 år. Bruk kun reservedeler bestilt gjennom Hjelpemiddelsspesialisten AS.

**Kontroller brukeren** kontinuerlig for tegn til rød hud etter bruk. Hvis tegn til dette oppstår, må bruk av beltet opphøre umiddelbart.

**Kontroll av slitasje** Kontroller båndene og beltet regelmessig for tegn på slitasje.

**Produktet passer** til sittesystemene Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic Sits. For øvrige kombinasjoner, kontakt Anatomic Sitt AB.

**Gjenvinning** En slitt del eller et slitt produkt demonteres og kastes. Delene skal separeres etter type materiell

## ENG – SittBelt must be mounted and adapted by medical/qualified people.

- 1) The SittBelt should be mounted on the wheelchair in the fix points. Look for a tube under or along the seat plate.
- 2) Run the strap through the enclosed Tri-glide buckle, pic. 4. If the straps are too long, cut the superfluous strap and singe the end.
- 3) Adjust the pull direction by tightening respective strap according to pic. 2.
- 4) Tighten the belt on both sides of the buckle in order to get it centered. Tighten to a suitable pressure. Release the pressure if the user feels discomfort.
- 5) The belt cushions are laterally adjustable. Adjust them to receive an optimum pressure relief.

## Supervisory control (check at every new adjustment)

- The pull direction, pic. 2 • The pressure of the strap • The position of the belt cushions.

**Washing instructions** Support Eksklusiv 400, softwash // Support Soft 600, softwash Do not dry in a tumbler or drying cabinet.

**Guarantee** 1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.

**Check the user** continuously to discover any redness of the skin that remains. If such arises, you must immediately stop using the belt.

**Wear control** Check the straps, (especially at the fix points), and the belt cushions to discover any signs of wear.

**The product fits** the seating systems Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic SITS. For other combinations, contact Anatomic SITT AB.

**Recycling** A worn out part or product should be disassembled and discarded. Separate and sort after material type.