



Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.

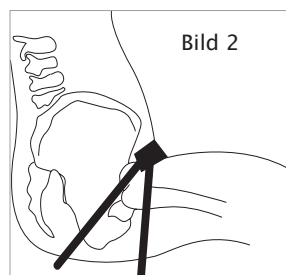

Rätt dragriktning

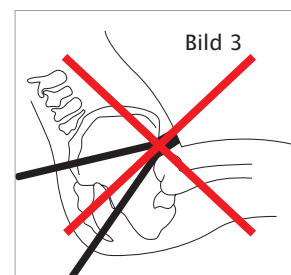

Fel dragriktning

Bild 4



Tri-glide metoden

Antirotationsbältet ska monteras och anpassas av medicinskt/behörig personal.

- 1) Antirotationsbältet ska monteras på rullstolen fästpunkterna. Titta efter ett rör som går under eller vid sidan av sittplattan.
- 2) Trä bandet genom bif. tri-glide spänne som bild 4 visar. Om banden är för långa, klipp av överflödigt band och bränn änden.
- 3) Justera dragriktningen genom att spänna respektive band, bild 2.
- 4) Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat. Drag åt lagom hårt. Om brukaren känner obehag lossa på trycket.
- 5) Bälteskuddarna är justerbara i sidled. Justera dem för att ge optimal tryckavlastning.

Efterkontroll (kontrolleras vid varje ny insittning)

- Dragriktningen enligt bild 2
- Trycket på bandet
- Placeringen av bälteskuddarna.

Daglig skötsel/Rekondanvisning

Torkas enkelt av med fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. Visuellt översyn av sömmar, band och spännen så att det är helt och fungerar.

Tvättråd

60°, fintvätt. Ej torktumling. Torskskåp låg temperatur, vi rekommenderar dock hängtorkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta i tvättpåse.

Garanti

1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB

Kontroller

Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda selen. Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden kontroll utföras. Behovet måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Tillåtna anpassningar

Kapning av band. Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning. En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Produkten passar till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt till marknadens rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer kontakta Anatomic SITT AB.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall separeras efter materialtyp.

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under transport, som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.

OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.



Positioneringsserien Support är inte avsedd att ersätta vårdpersonalens tillsyn.



Box 6137, SE- 600 06 NORRKÖPING
Tel. +46 11-16 18 00, Fax +46 11-16 20 05
www.anatomicstt.com



Viengevej 4, 8240 RISSKOV
Tel. +45 86- 17 01 74, Fax: +45 86- 17 01 75
www.anatomicstt.com




Håndverksvein 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64- 91 80 60, Fax +47 64- 91 80 66
www.bardum.no


Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.



Picture 1

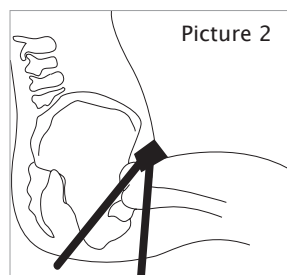

Right pulling direction

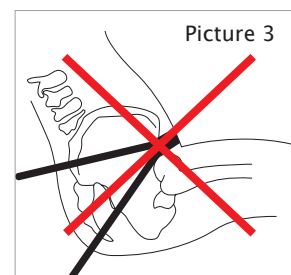

Wrong pulling direction

Picture 4



Tri-glide

The product must be mounted and adapted by medical/qualified people.

- 1) The belt is mounted in the chair mounting points. Look for a tube going under or at the side of the seat plate.
- 2) Runt the strap through the Tri-glide buckle shown in Figure 4. If the straps are too long, cut the strap and burn the end..
- 3) Adjust the pulling direction by tightening the straps, picture 2.
- 4) Tighten the belt on both sides of the buckle to get it centered. If the patient becomes uncomfortable release the pressure.
- 5) The cushions are adjustable sideways. Adjust them to provide optimal pressure relief.

Supervisory control (check at every new adjustment)

- The pulling direction, picture 2 • The pressure of the strap • The position of the belt cushions.

Daily care

Wipe with a damp cloth and / or disinfectants. Visual oversight of the seams, straps and buckles, making sure it works properly.

Washing instructions

60°, soft wash. Do not tumble dry. Drying cabinet, low temperature, we recommend, however, hang drying (dries faster). For longer durability wash in laundry bag.

Guarantee

1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.

Controls

Make continuous checks of the user to discover any skin redness that remains. If this occurs, immediately stop using the product. Check the straps, (especially at the points of attachment); and belt cushions to discover any wear.

Service

In order for the product to work properly and safely, you need to check it regularly. The need must be assessed case by case, depending entirely on the use and wear. Work should always be professional and qualified staff. If you are unsure, you are always welcome to contact Anatomic SITT AB.

Allowed adaptations

Cutting the straps. Each time the product is changed in any way you have to assess whether it is an adaptation or customization. An adaptation is a change made in the context of the product's CE Mark. Everything else is a customization. Adjustments may be made only by the person who is considered qualified for the task and should always be performed in a professional manner. The CE mark means that the product meets all relevant European safety requirements.

The product fits Anatomic SITT's seating systems as well as other brands of wheel chairs and seating systems. For other combinations, contact Anatomic SITT AB.

Recycling

A worn out part or product should be disassembled and discarded. Separate and sort after material type.

This product is intended to securely position a user. The product should not be used as safety belt during transport, as restraint of a person or in any other manner that could cause injury.

NOTE! The prescriber of the medical device, or someone with equivalent skills and knowledge of the patient and the medical device, must always perform a risk analysis before use. If this analysis shows that there may be risk of serious injury, the patient must never be left unattended when the medical device is used.



The Support Serie is not intended to redplace health care staff supervision.



Box 6137, SE- 600 06 NORRKÖPING
Tel. +46 11-16 18 00, Fax +46 11-16 20 05
www.anatomicstt.com



Viengevej 4, 8240 RISSKOV
Tel. +45 86- 17 01 74, Fax: +45 86- 17 01 75
www.anatomicstt.com



Håndverksvein 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64- 91 80 60, Fax +47 64- 91 80 66
www.bardum.no