



Produktübersicht 2008/2009



Thomas Mikosch
Mobil: +49 (0) 172 / 52 29 722
Fon: +49 (0) 2565 / 40 35 950
Fax: +49 (0) 2565 / 40 35 959
thomas.mikosch@anatomicsitt.de



Thomas Tittmann
Mobil: +49 (0) 151 / 155 37 089
Fon: +49 (0) 375 / 79 59 50
Fax: +49 (0) 375 / 78 81 091
thomas.tittmann@anatomicsitt.de



Anatomic SITT AB, Sweden
Box 6137, SE-600 06 NORRKÖPING
Tel.: +46 11- 16 18 00
Fax: +46 11- 16 20 05
info@anatomicsitt.com

Anatomic SITT Deutschland GmbH
Am Königsweg 13, D-48599 Gronau
Fon: +49 (0) 2565 / 4035950
Fax: +49 (0) 2565 / 4035959
info@anatomicsitt.de



www.anatomicsitt.de

www.anatomicsitt.de



Herzlich willkommen bei uns von der Anatomic Sitt AB

Seit 1988 haben wir die Vision, mit unserem Wissen und neuen Denksätzen innovative Lösungen und Hilfsmittel für all diejenigen zu schaffen, die sie benötigen. Wir von Anatomic Sitt sind stolz, leidenschaftliche Menschen, die darauf brennen, Hilfsmittel und Lösungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen zu finden. Sie alle "da draußen" haben auf verschiedenste Weise dazu beigetragen, unsere Produkte zu dem zu entwickeln, was sie heute sind, und wir freuen uns sehr, dass wir das Dasein für unsere Benutzer gemeinsam verbessert haben. Gut ausgebildete Mitarbeiter mit höchster Kompetenz auf verschiedenen Gebieten zu haben, ist für uns ein Muss. Wir wissen, dass Fachkenntnisse oftmals den Unterschied zwischen einer guten und einer weniger guten "Lösung" für unsere Benutzer ausmachen. Ich spreche für alle in unserem Unternehmen, wenn ich sage, dass wir immer versuchen, die zu sein, die zuletzt aufgeben. Dass wir gemeinsam mit Ihnen, ein besseres Dasein für unsere Benutzer schaffen wollen. Schließlich möchten wir Ihnen allen danken, die über die Jahre an uns geglaubt haben, und wir versprechen, Ihnen auch in Zukunft immer Neuheiten und innovative Lösungen anzubieten. All denjenigen, die mit uns noch nicht gearbeitet haben, hoffen wir zukünftig zeigen zu können, was wir gemeinsam erreichen können.



Mit freundlichen Grüßen

Bo Eriksson
Geschäftsführender Direktor Anatomic SITT AB, Sweden

Sitzorthese Anatomic - Individuell gefertigt

Eine individuell gefertigte Sitzorthese ist oftmals die einzig sinnvolle Lösung für Menschen mit starken körperlichen Behinderungen. Eine gute Passform und korrekte Unterstützung sind entscheidend für eine tatsächlich funktionelle Sitzversorgung.

- Korrektur von Fehlstellungen
- effektive Druckverteilung
- Verbesserung der Atmung
- Verbesserung der Wahrnehmung

Durch die jahrelange Erfahrung im Sitzorthesenbau und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit zahlreichen Eltern, Therapeuten, Ärzten, Behinderteneinrichtungen usw. sind mittlerweile viele Lösungen entstanden:



-Durch die übergroße Form unseres Vacuumabdruckkissens lassen sich durch unser Verfahren selbst schwierigste Körperformen nahtlos abformen.

-Die verschiedenen, passgenauen Inlets können wir für Sie in unterschiedlichen Härtegraden und Schaumarten herstellen, die somit Einfluß auf die tagesformabhängige Muskelspannung nehmen.

-Sitzorthesen und verschiedene Untergestelle lassen sich einfach per Adapter „adaptieren“ und dadurch umfangreich nutzen- Indoors, Outdoors und sogar „Aotdoors“ in Ihrem Kfz.

Sittermo

Sittermo ist eine spezielle Bekleidungsreihe für Menschen mit Behinderungen die hervorragend zu unseren Sitzorthesen passt.



Jacke

Hose

Schlupfsack

Universal-Halter



Beispiel für Anwendungsbereich:
Die Universalklemmschelle wird einfach sowohl um runde wie vierkantige Rohre mit den Abmessungen 20,0 - 30,0 mm montiert. Die Klemmschelle wird entweder unbehandelt oder mit schwarzer Oberfläche geliefert.



Anatomic SITT verwendet die Klemmschelle in verschiedenem Zusammenhang, z. B. wie oben zusammen mit dem Halter zwischen den Schiebegriffen. (Art. 7022).




Sortimentskoffer

Standardklemmschelle

Einstellbare Klemmschelle

Extralange einstellbare Klemmschelle

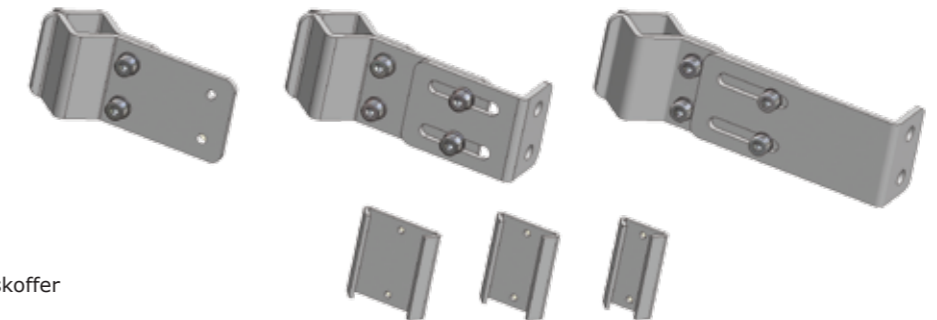

Halter zwischen den Schiebegriffen

Der Halter zwischen den Schiebegriffen wird um den Schiebegriff/das Rückenrohr des Rollstuhls montiert. Passt sowohl auf runde wie viereckige Rohre mit den Abmessungen 20,0 - 30,0 mm. Eine Kopfstützenbefestigung ist enthalten. Zur einfachen Montage der Anatomic Kopfstütze, PLUSH & Pro Serie kaufen Sie bitte Innenhülsen gemäß Artikelliste (Innenhülse mitbestellen).

Bei Bedarf können auch Verlängerungsstreben für Sternumgurt und X-Gurt hinzugekauft werden.



Am Königsweg 13, D-48599 Gronau, Fon: +49 (0) 2565 / 4035950
www.anatomicsitt.de



Support

Positionierungshilfen mit hervorragender Passform, stark beanspruchbar und zum Einsatz für nahezu jedes Sitzsystem geeignet.

SE

SSS

SSB

In drei verschiedenen Varianten erhältlich:

Exklusiv – Lederähnliches Material, abwischbar.

Soft - Stretch-Material, folgt dynamisch der Bewegung (schwarz)

Soft - Stretch-Material, folgt dynamisch der Bewegung (blau)



STERNUMGURT:

Der Sternumgurt sorgt für eine gezielte Unterstützung über dem Brustbein.

Anzahl Größen: 4

Erhältlich in den Modellen:

SE SS SBB

STERNUMGURT WESTE:

Der Sternumgurtweste sorgt für eine gezielte Unterstützung über dem Brustbein.

Anzahl Größen: 4

Erhältlich in den Modellen:

SE SS SBB

X-GURT:

Der X-Gurt unterstützt sowohl Schulterpartie als auch Rumpf.

Anzahl Größen: 2

Erhältlich in den Modellen:

SE SS SBB

H-GURT:

Der H-Gurt unterstützt sowohl Schulterpartie als auch Rumpf. Wird bei etwaiger Rotation benutzt und hält die Schulterpartie zurück. Kann auch verwendet werden, wenn man nur auf nur einseitig Unterstützung benötigt.

Anzahl Größen: 3

Erhältlich in den Modellen:

SE SS SBB



BECKENGURT SITTBelt

Ein Beckengurt kann ebenso bedeutend sein, wie ein druckentlastendes Kissen. Unser SITTBelt positioniert das Becken in der korrekten Position und verhindert ein Verschieben des Gurtes. Unnötiger Druck auf Steißbein & Sitzhöcker wird so vermieden.



HANDMANSCHETTEN:

Ein perfektes Hilfsmittel für Benutzer, die Schwierigkeiten haben, die Hand/Hände z. B. an einem Lenker/Handgriff zu halten. Gibt es als Version Support-Exklusiv.



KNÖCHELHALTER:

Der Knöchelhalter sorgt für stabilen Halt, um unfreiwillige Supination und Pronation des Fußes zu verhindern. Der Knöchelhalter wird an verschiedene Fußstützen montiert, indem das Feststellband an die Fußplatte geschraubt wird. Gibt es als Version Support-Exklusiv & Soft



ARMGURT:

Der Armguurt wird diagonal montiert, um ein "Überstrecken" zu verhindern. Gibt es als Version Support-Exklusiv & Soft.

Am Königsweg 13, D-48599 Gronau, Fon: +49 (0) 2565 / 4035950

www.anatomicsitt.de

Anatomic
-SITT-

Sitzorthese Anatomic m. Ventilationseinheit

Mit unserer integrierten Ventilationseinheit schaffen wir auch für Patienten mit Regulationsstörungen ein erträgliches Klima in unseren Sitzorthesen. Ein gleichmäßiger Luftstrom ventiliert Sitz und Rücken und hält die Haut trocken.



Sitzorthese Anatomic m. Flexback-Einheit

Durch unser flexibles Gelenk „Flexback“ in der Hüftachse haben unsere Benutzer die Möglichkeit sich achsengerecht zu bewegen.



Zitzi Sharky

Sitzorthesensystem für Jugendliche & Erwachsene

HMV 26.11.01.0000

Hersteller: Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 86 HUSKÖPINGS
SWEDEN - PHONE: +46 (0)31-66 18 00



Zitzi Delfi

Sitzorthesensystem für Kinder

Durch die korrekte Positionierung in einer Zitzi Sharky/ Zitzi Delfi kann sich der Anwender voll auf seine Entwicklung konzentrieren.

- Sitzeinheit wächst mit dem Anwender
- geeignet für Jugendliche & Erwachsene
- für Hypo- und hypertone Anwender
- ermöglicht funktionelle Bewegungen
- wirkt Fehlstellungen effektiv entgegen
- einfach anpassbar

- Sitzeinheit wächst mit dem Kind
- geeignet für Kinder bis 135cm Körpergröße
- für Hypo- und hypertone Kinder
- ermöglicht funktionelle Bewegungen
- wirkt Fehlstellungen effektiv entgegen
- einfach anpassbar



Zitzi Delfi:
Anzahl Größen: 3 st
Körpergrößen ca.: < 130 cm

Zitzi Sharky:
Anzahl Größen: 2 st
Körpergrößen ca.: 125-185 cm



Justierbare Beiführungselemente

Durch diese Elemente lassen sich Abduktion, Beinlängendifferenzen und sogar Arthrosen unkompliziert anpassen und ausgleichen.



Stufenlose Abduktion



Beinlängendifferenz

"Flex-Gelenk"

Die Sitzeinheit ist mit einem Flex-Gelenk ausgerüstet, um eine etwaige Spastizität zu lösen und das Sitzen zu dynamisieren. Der Rückenwinkel umfasst einen Verstellbereich von 5° nach vorne bis 30° nach hinten.



Zitzi Willy

Durch die korrekte Positionierung in einem Willy-Hygienestuhl kann sich der Anwender voll auf seine Entwicklung konzentrieren.

HMV 33.40.04.0000

Hersteller: Anatomic SIT7 AB
Box 6137, SE-600 06 NORRÄPPING
SCHWEDEN - Phone: +46 (0)31-26 28 00



- Sitzeinheit wächst mit dem Anwender
- geeignet für Jugendliche & Erwachsene bis 170cm Körpergröße
- bis 130kg belastbar!
- für Hypo- und hypertone Anwender
- ermöglicht funktionelle Bewegungen
- wirkt Fehlstellungen effektiv entgegen
- einfach anpassbar
- rostfreie Konstruktion
- Form der Sitzfläche ermöglicht eine einfache Katheterisierung



Individuelle Hygiene Sitzorthese

Eine individuelle Lösung für Anwender mit schweren Sitzproblemen, die hervorragend mit unserem Untergestell Willy harmoniert.



Zitzi Willy Starfish basiert auf Zitzi Willy, bietet jedoch weitere Anpassungsmöglichkeiten wie die einstellbare Sitztiefe und Abduktion.

Zitzi Carseat

Der sichere "Wohlfühl"-Kindersitz der mitwächst!

HMV 26.11.06.0000

Hersteller: Anatomic SIT7 AB
Box 6137, SE-600 06 NORRÄPPING
SCHWEDEN - Phone: +46 (0)31-26 28 00



- für Kinder & jugendliche bis 170cm Körpergröße
- für hypo- und hypertone Anwender
- ermöglicht funktionelle Bewegungen
- einfach zu verstellen
- zugelassen n. ECE R44.3
- crashgetestet & bestanden bis 75 kg Körpergewicht



Drehplatte

Zum leichteren Transfer lässt sich der Carseat mit der Drehplatte auf dem Autositz wenden.



Beinlängendifferenz



Abduktion

Justierbare Beiführungselemente

Durch diese Elemente lassen sich Abduktion, Beinlängendifferenzen und sogar Arthrosen unkompliziert anpassen und ausgleichen.

Anzahl Größen: 3 st
Gewicht: 6 kg
Körpergewicht: 9 bis 75 kg



"Flex-Rückenlehne"

Untergestell - für den Innen- und Außenbereich

Untergestelle für viele Anwendungsbereiche zur sinnvollen Ergänzung unserer Sitzsysteme.

Zitzi Wave

Anzahl Größen: 1 st
Max. Belastung: 65 kg
Neigung Sitzeinheit: JA (30°)



Zitzi Wave!

Wave- endlich ein echter Sitzschalenbuggy!
Funktionell und stabil, dynamisch durch die integrierte Federung und einfach zusammenklappbar. Wave wurde speziell für unsere Zitzi Delfi- Sitzeinheit entwickelt und eignet sich ebenso für Individuelle Sitzorthesen. Wave lässt sich bis 75 kg belasten und wurde stabil konstruiert, ohne den Anwender einschränken.

Flipper

Anzahl Größen: 2 st
Max. Belastung: 85 kg
Neigung Sitzeinheit: JA (25°)
Stufenlose Sitzhöhe: JA



Flipper- auf jeder Ebene zuhause!

Flipper ist unser Allround-Untergestell für den Innen und Außenbereich und verträgt 85kg Belastung! Die Neigungsverstellung bietet einen Bereich von -15° nach vorne bis +50° nach hinten. Durch den großen Verstellbereich können die Anwender "auf jeder Ebene" wahrnehmen. Flipper gibt es für den Außenbereich mit 12" Rädern hinten, Trommelbremsen, Schiebepoden und wahlweise mit einer manuellen oder elektrischen Hubeinheit.

Crashtests wurden mit Zitzi Delfi und Zitzi Sharky durchgeführt