



### BECKENGURT SITTBelt

Ein Beckengurt kann ebenso bedeutend sein, wie ein druckentlastendes Kissen. Unser SITTBelt positioniert das Becken in der korrekten Position und verhindert ein Verschieben des Gurtes. Unnötiger Druck auf Steißbein & Sitzhocker wird so vermieden.

Erhältlich in 4 Ausführungen als  
Support Exklusiv (Skai) und  
Support-Soft (Neopren)

SITTBelt, Erwachsene / Large mit S742-Gurtschloss  
SITTBelt, Erwachsene / Large mit Autogurtschloss  
SITTBelt, Erwachsene / Large mit S40-Gurtschloss  
SITTBelt, Kinder / Small mit Fixgurtschloss



### HANDMANSCHETTE:

Ein perfektes Hilfsmittel für Benutzer, die Schwierigkeiten haben, die Hand/ Hände z. B. an einem Lenker/Handgriff zu halten. Gibt es als Version Support-Exklusiv.

Erhältlich in den Größen:  
Small, Medium, Large



### ARMGURT:

Der Armgurt wird diagonal montiert, um ein "Überstrecken" zu verhindern. Gibt es als Version Support-Exklusiv & Soft.

Erhältlich in den Größen:  
Small, Medium, Large



### KNÖCHELHALTER:


Der Knöchelhalter sorgt für stabilen Halt, um unfreiwillige Supination und Pronation des Fußes zu verhindern. Der Knöchelhalter wird an verschiedene Fußstützen montiert, indem das Feststellband an die Fußplatte geschraubt wird. Gibt es als Version Support-Exklusiv & Soft

Erhältlich in den Größen:  
Small, Medium, Large



### Gurthalter zur Montage zwischen den Schiebegriffen

Zur Anwendung in Rollstühlen ohne adäquate Vorrichtung für Befestigungssysteme

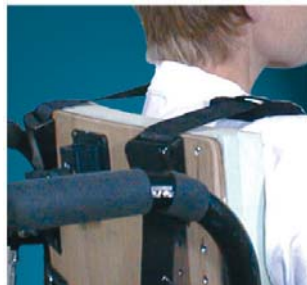

### Beispiel: Montage an eine stabile Rückenlehne:

Nur eine korrekte Montage der Positionierungshilfen stellt eine korrekte Funktion sicher.

Die Zugrichtung der Schulterzüge sollte auf Höhe der Schulterkante erfolgen.

Sollte die Rückenhöhe zur Montage der Klappschnallen nicht ausreichen, lassen sich unsere Montagebügel verwenden.

Die unteren Befestigungspunkte lassen sich mittels der beigelieferten Gurtschnallen fixieren.