



Feedback van behandelaars en eindgebruikers heeft geleid tot een ontwerp voor een sta-orthese met een focus op positionering, aanpasbaarheid en groeimogelijkheden. De Easystand Evolv is verkrijgbaar in 3 maten en met opties voor een verscheidenheid aan eindgebruikers.

Evolv Youth Sta-orthese:


Geschikt voor personen van 122cm tot 168 cm, max. belastbaar tot 90 kg.

Evolv Adult Sta-orthese:

Geschikt voor personen van 152cm tot 188cm, max. belastbaar tot 127 kg.

Evolv XT Sta-orthese:

Geschikt voor personen van 183cm tot 208cm, max. belastbaar tot 159kg.

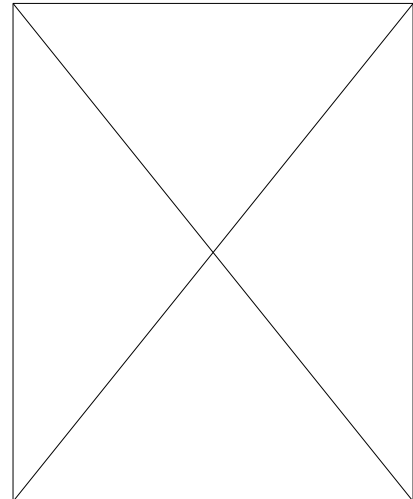

Een sta-orthese ontworpen voor: Nauwkeurige Positionering

De ideale sta-positie is geperfectioneerd in de Easystand Evolv sta-orthese. Door een uitgekende plaatsing van de scharnierpunten van de sta-orthese t.o.v. de draaipunten in het lichaam van de gebruiker, blijven opties als heuppelotten, romppelotten, en hoofdondersteuning op dezelfde plek zitten tijdens de beweging van zit naar stand. Indien de sta-orthese correct is ingesteld, realiseert de contourzitting een maximale opstrekking voor een grote diversiteit aan lichaamstypes.

Een sta-orthese ontworpen voor: Aanpasbaarheid en Groeimogelijkheden

De EasyStand Evolv is de meest uitgebreid aanpasbare sta-orthese tot nog toe; meer dan 50 [opties en configuraties](#) zoals de [zelfrijfunctie](#), [Crosstraining module](#) of de [wegzwenkbare Shadow Tray](#) welke altijd kunnen worden toegevoegd. The Evolv sta-orthese is eenvoudig, zonder gereedschap, in te stellen voor gebruik voor meerdere personen of om de instelling aan groeiende tieners aan te passen. Als een kind uit een Evolv Youth groeit, kan deze m.b.v. van een ombouwset worden omgebouwd naar een Evolv Adult.



Vicki Price
Cerebral Palsy, 4'11" (150 cm)

Een sta-orthese ontworpen: Toegankelijkheid en onafhankelijkheid

Het open frame en de brede zitting maken het eenvoudiger zelfstandig of met een tillift de transfer te maken. Voor cliënten die zelfstandig de transfer maken is als optie een wegneembare rugleuning of een draaibare zitting leverbaar. De eindgebruiker kan zelfstandig tot stand komen m.b.v. de handmatige hydraulische pomp of de optionele, elektrische Pow'r Up Lift.

Een sta-orthese ontworpen voor: veiligheid en comfort


De stabiele Evolv sta-orthese draagt zorg voor een veilige en ondersteunende mogelijkheid om van zit naar stand te komen. Dit wordt mogelijk gemaakt in drie stappen: **instellen, transfer maken en tot stand komen.** Zowel begeleiders als eindgebruiker ervaren meer gemak/comfort met de Evolv door veilige en eenvoudige transfer en de ondersteuning bij het van zit naar stand gaan. Omdat bovenstaand maar woorden zijn, zouden we graag een keer vrijblijvend een passing bij u komen doen, om u te overtuigen van de kwaliteiten van de Easystand Evolv.



Karly Wahlin
Rett Syndrome, 5'7" (170 cm)

A Stander Designed for: Increasing Standing Compliance

There are a number of excellent [research studies](#) documenting the benefits of passive standing programs for an individual's long-term health. The EasyStand Evolv stander allows the user to move in and out of standing without having to be lifted or transferred. This makes it easier to be compliant with a standing program by standing in small bursts and yet still stand for the 120 minutes needed to affect [bone density and maximize other health benefits](#).

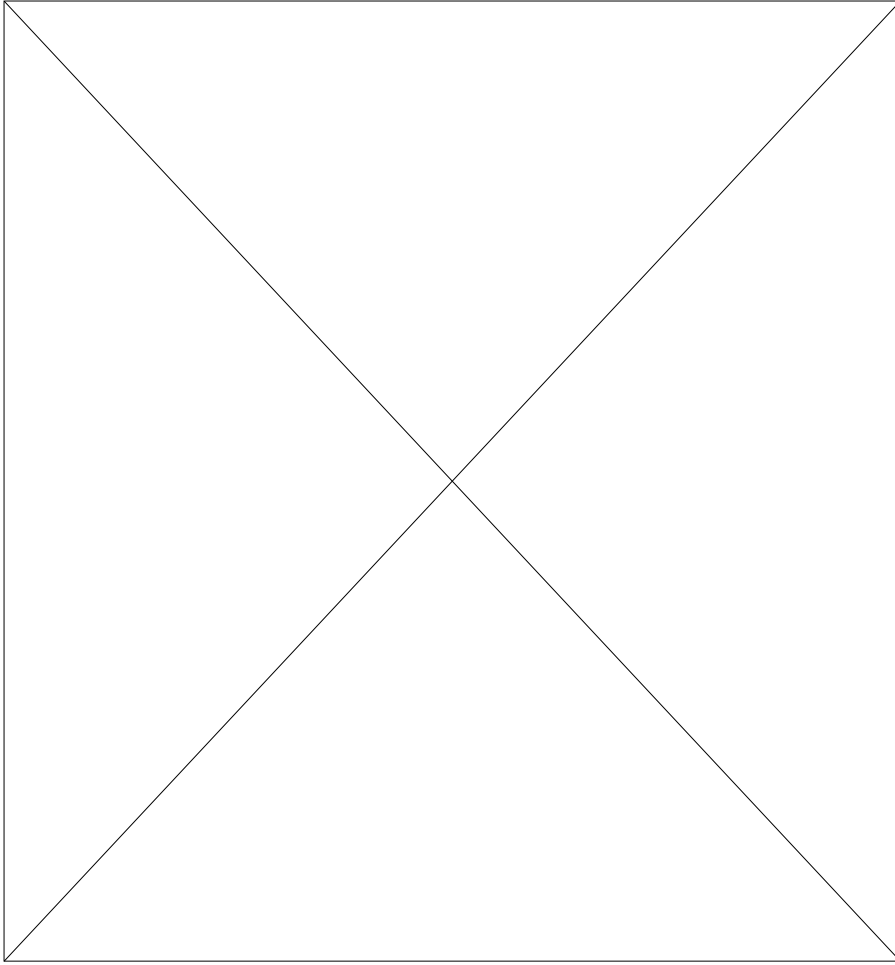

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. Altimate Medical maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with Altimate Medical for the latest information.